

# HANDLEIDING

## **Telefoonclip+**



## Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Telefoonclip+.

Met de Telefoonclip+ koppelt u draadloze hoortoestellen aan mobiele telefoons met Bluetooth. Het resultaat is een helder, probleemloos telefoongesprek. Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

De Telefoonclip+ werkt ook als afstandsbediening waarmee u het volume van uw hoortoestellen aanpast en tussen programma's kunt wisselen als u niet aan de telefoon bent.

U kunt ook de microfoon van uw hoortoestel dempen om omgevingsgeluiden buiten te sluiten als u aan de telefoon bent, of als u de Telefoonclip+ als afstandsbediening gebruikt (functie alleen beschikbaar op geselecteerde modellen).

Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van de voordelen van de Telefoonclip+. Raadpleeg uw hoorspecialist bij overige vragen.

Lees voor uw eigen veiligheid het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 25-31 goed door!

FCC ID: X26BTB-2

## Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die leidt tot ongewenste werking van het apparaat.

LET OP: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan Klasse B digitale apparatuur worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- Dit apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger.
- De verkoper of een ervaren radio-/televisietechnicus raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

### **Gebruiksbestemming**

De Telefoonclip+ is een apparaat waarmee gebruikers van een compatibel draadloos hoortoestel beter telefoongesprekken kunnen voeren. De Telefoonclip+ stuurt signalen over tussen een telefoon met Bluetoothaansluiting en de draadloze compatibele hoortoestellen.

Als u niet aan de telefoon bent, kunt u de Telefoonclip+ ook gebruiken als een basis afstandbediening waarmee u het volume van uw hoortoestellen aanpast, programma's wijzigt en de mutefunctie\* van het hoortoestel in- of uitschakelt.

\*Functionaliteit beschikbaar in sommige hoortoestellen

Deze producten zijn in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

In de EU: het apparaat voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD).

Hierbij verklaart GN Hearing A/S dat de radioapparatuurtype(n) BTB-2 voldoet/voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is in te zien op het volgende internetadres: [declarations.resound.com](http://declarations.resound.com)

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd onder de regels van ISSED.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.


Voldoet aan Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving. Dit toestel is goedgekeurd conform de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit toestel mag niet gemodificeerd worden (anders wordt het toegekende bestemmingsnummer ongeldig)

## Inhoud


|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Beschrijving . . . . .                          | 8  |
| Van start met uw Telefoonclip+ . . . . .        | 10 |
| Uw Telefoonclip+ aan-/en uitschakelen. . . . .  | 11 |
| Koppelen via Bluetooth . . . . .                | 13 |
| Telefoonbediening. . . . .                      | 16 |
| Afstandsbedieningen en Volumeregeling . . . . . | 20 |
| Gebuikstijd . . . . .                           | 21 |
| Uw Telefoonclip+ dragen . . . . .               | 21 |
| Indicatielampje (LED). . . . .                  | 22 |
| Introductie tot Bluetooth . . . . .             | 23 |
| Belangrijke Informatie . . . . .                | 23 |
| Technische specificaties . . . . .              | 32 |
| Garantie . . . . .                              | 33 |
| Oplossen van problemen . . . . .                | 36 |

## Beschrijving

1. Aan-/uitschakelaar
2. Knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek
3. Programmaknop voor hoortoestel
4. Muteknop voor hoortoestelmicrofoon
5. Mini-USB-ingang voor oplader

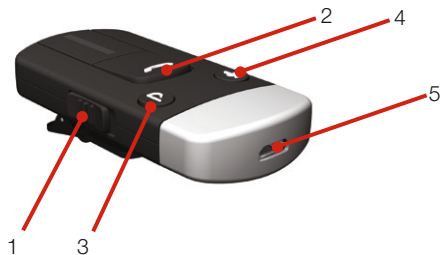

6. Volumeregelaar
7. Microfoon
8. Bevestigingsklem
9. Koppelknop voor hoortoestel
10. Knop voor verbinden met Bluetooth

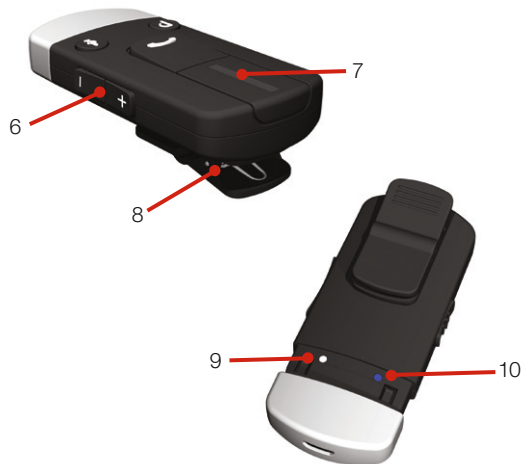

## **Van start met uw Telefoonclip+**

### *Accu opladen*

Voor u de Telefoonclip+ kunt gebruiken, moet u de accu volledig laden.

Sluit het oplaadsnoer aan op de Telefoonclip+ zoals weergegeven in figuur.

Steek daarna de stekker in het stop-contact.

Tijdens het opladen is het indicatielampje bovenop de Telefoonclip+ rood.

Wanneer hij volledig is opgeladen en nog steeds verbonden aan de lader, brandt het lampje groen, om de 2 seconden onderbroken door een rood knipperend lampje.

Gewoonlijk duurt het opladen van een lege accu ongeveer 3 uur.

De Telefoonclip+ kan gerust 's nachts aan de oplader blijven. U kunt de accu niet overladen.

- Laad de Telefoonclip+ minimaal 3 uur op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt. Ook wanneer het indicatielampje al eerder groen oplicht.



- Laad de accu om veiligheidsredenen alleen op met de oplader die door uw hoorspecialist geleverd is en speciaal bedoeld is voor uw Telefoonclip+.



Laad uw Telefoonclip+ niet op terwijl u deze op het lichaam draagt.

Telefoonclip+ aanzetten: schuif de aan-/uitschakelaar naar de AAN-positie. Een wit 'I'-streepje wordt zichtbaar onderaan de schakelaar en het indicatielampje licht iedere 2,5 seconde groen op.

Telefoonclip+ uitzetten: schuif de aan-/uitschakelaar naar de UIT-positie. Het indicatielampje stopt met knipperen.

Als de batterijspanning laag is, licht het indicatielampje iedere 2 seconden geel op, zodat u weet dat de Telefoonclip+ moet worden opgeladen.

*Koppelen aan uw hoortoestellen*



**Let op:** de volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw hoorspecialist, die in de meeste gevallen de handelingen uitvoert die nodig zijn om de Telefoonclip+ te gebruiken met uw hoortoestel. De handelingen zijn overigens zo eenvoudig dat ze door bijna iedereen kunnen worden uitgevoerd.

1. Zorg ervoor dat de Telefoonclip+ aanstaat. Zet uw hoortoe-  
stellen uit door de batterijlade te openen.
2. Verwijder het zilverkleurige kapje van de Telefoonclip+. Druk  
met een pen of vergelijkbaar voorwerp op de kleine witte  
knop op de achterkant van uw Telefoonclip+ (zie afbeelding  
rechts). Het LED-indicatielampje  
knippert nu om de 2 secon-  
den geel, om aan te geven  
dat hij klaar is om te worden  
gekoppeld met uw hoortoe-  
stellen. Uw Telefoonclip+ blijft  
gedurende 20 seconden in  
de koppelmodus.
3. Sluit, als koppelmodus actief  
is, de batterijlade van beide  
hoortoestellen en controleer  
of ze AAN staan. Bij een succesvolle koppeling klinkt een  
melodie in beide hoortoestellen. Het indicatielampje op de  
Telefoonclip+ licht 2 seconden geel op.



## Verbinden met Bluetooth

Als uw mobiele telefoon Bluetooth heeft en de juiste profielen ondersteunt, kan hij na de koppel-en verbindingsprocedure communiceren met de Telefoonclip+.

Door de aansluitprocedure kunt u regelen welke Bluetooth-apparaten met elkaar kunnen communiceren. U hoeft deze procedure slechts eenmalig uit te voeren voor elk apparaat dat u gebruikt met de Telefoonclip+.


U kunt maximaal 8 Bluetoothapparaten verbinden met de Telefoonclip+, maar u kunt met slechts 2 Bluetoothapparaten tegelijkertijd verbinding maken.

Hieronder vindt u een beschrijving van de koppelprocedure. Als de koppelprocedure er voor gezorgd heeft dat een mobiele telefoon kan communiceren met de Telefoonclip+, zorgt de verbindingsprocedure ervoor dat het apparaat zijn audiosignaal werkelijk verzendt via de Bluetoothverbinding. Ook deze procedure wordt hieronder beschreven.

### *Koppelen aan uw mobiele telefoon*

U voert deze procedure uit op uw mobiele telefoon. Iedere telefoon heeft een andere menustructuur. Zie daarom de hand-  
leiding van uw mobiele telefoon als u de koppelprocedure niet kunt voltooien aan de hand van de algemene stappen die hier beschreven zijn.

1. Zet uw Telefoonclip+ AAN en verwijder het zilverkleurige kapje. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon AAN is en leg hem naast de Telefoonclip+.
2. Ga naar de verbindinginstellingen op uw telefoon. Zoek de functie 'Bluetooth' in het hoofdmenu of in een van de submenu's, zoals 'Verbindingen'.
3. Druk met een pen of vergelijkbaar voorwerp op de kleine blauwe Bluetoothknop op de achterkant van uw Telefoonclip+ (zie afbeelding hieronder). De Telefoonclip+ blijft nu 2 minuten in de Bluetoothverbindingsmodus staan.
4. Ga op uw mobiele telefoon op zoek naar Bluetooth-apparaten.
5. In uw mobiele telefoon staat een lijst met gedetecteerde Bluetoothapparaten. Kies 'Hoortoestel telefoon' in deze lijst.
6. Uw mobiele telefoon kan nu om een toegangscode vragen. Voer dan '0000' (vier nullen) in.

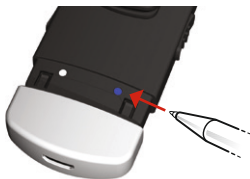

Uw Telefoonclip+ is nu gekoppeld aan uw mobiele telefoon. Sommige mobiele telefoons vragen welke Bluetoothservice u wilt gebruiken. Kies dan 'Hoofdtelefoon'.

#### *Verbinding maken*

Als uw mobiele telefoon en Telefoonclip+ zijn gekoppeld, moet er wellicht nog verbinding gemaakt worden met de mobiele telefoon, zodat de juiste audiosignalen verzonden kunnen worden.

Deze functie staat in het Bluetoothmenu van uw mobiele telefoon, meestal onder een lijst met "Aangesloten apparaten". Selecteer in die lijst uw Telefoonclip+ en kies 'Verbinden'.

Als de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon verbinding met elkaar hebben, ziet u een symbool van een hoofdtelefoon op het scherm van uw mobiele telefoon, zoals: 

De verbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon blijft bestaan zolang beide apparaten zijn ingeschakeld en binnen bereik van elkaar zijn. Als een van de twee apparaten wordt uitgeschakeld of buiten bereik van de ander is, moet u wellicht de verbindingsprocedure opnieuw uitvoeren.

Op sommige telefoons kunt u 'Automatisch opnieuw verbinden' instellen. We raden aan dit te doen als die mogelijkheid er is. Zie de handleiding van uw mobiele telefoon hoe u dit kunt instellen.



## Telefoonbediening

Hieronder leest u hoe u de Telefoonclip+ bedient als u hem gebruikt voor telefoongesprekken.

**Let op:** behalve de handeling voor het beantwoorden en beëindigen van een telefoongesprek, kunnen één of meerdere van onderstaande handelingen per telefoon verschillen of zelfs niet werken.

|                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Een gesprek aannemen en beëindigen</b>                                     | Druk één keer op de knop voor aannemen/ beëindigen telefoongesprek.                                             | Als u al aan het bellen bent wordt dit gesprek beëindigd en wordt het nieuwe gesprek, aangegeven door klopsignalen, aangenomen.<br><br>Als een ander gesprek in de wacht staat, wordt dat gesprek nu actief. |
| <b>Een gesprek weigeren</b>                                                   | Druk twee keer op de knop voor aannemen/ beëindigen telefoongesprek.                                            | Als u al aan de telefoon bent blijft dit gesprek actief en wordt het nieuwe gesprek, aangegeven door klopsignalen, geweigerd.                                                                                |
| <b>Een telefoongesprek overzetten van mobiele telefoon naar Telefoonclip+</b> | Klik 1 keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek.                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Een actief telefoongesprek in de wacht zetten</b>                          | Houd de knop voor aannemen/ beëindigen telefoongesprek 2 seconden ingedrukt.                                    | Als er al een gesprek in de wacht staat of er komt een inkomend gesprek binnen, dan wordt dit nu het actieve gesprek.                                                                                        |
| <b>Nummerherhaling</b>                                                        | Klik twee keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek (als er geen actief of wachtend gesprek is). | Als er twee mobiele telefoons zijn verbonden, is deze handeling van toepassing op de laatst gekoppelde telefoon.                                                                                             |



|                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Een nummer kiezen met uw stem</b>                                                                 | <p>Houd de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek 2 seconden lang ingedrukt (als er geen gesprek actief is).</p>                                   | <p>Als er twee mobiele telefoons zijn verbonden, is deze handeling van toepassing op de laatst gekoppelde telefoon.</p> <p>Deze functionaliteit werkt alleen als deze ook beschikbaar en ingeschakeld is op uw mobiele Bluetooth-telefoon.</p> |
| <b>Volume van de spreker aan de andere kant van de telefoon harder of zachter zetten</b>             | <p>Druk het +teken op de Telefoonclip+ in om het volume hoger te zetten.</p> <p>Druk het -teken op de Telefoonclip+ in om het volume lager te zetten.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Het geluid van de microfoons van uw hoortoestel uit- of aanzetten tijdens het telefoongesprek</b> | <p>Druk op de knop mute/unmute  op de voorkant van de Telefoonclip+.</p> | <p>Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen draadloze hoortoestellen.</p>                                                                                                                                                       |

## Afstandsbediening

Als u niet aan de telefoon bent, kunt u de Telefoonclip+ ook gebruiken als eenvoudige afstandsbediening voor uw hoortoestellen\*.

### Volumeregelaar van uw hoortoestel(len) (nr 6 op pagina 9)

*Het volume van uw hoortoestel(len) harder zetten:*

U drukt op het +teken van de volumeregelaar om het volume van uw hoortoestellen te verhogen.

*Het volume van uw hoortoestel(len) zachter zetten:*

U drukt op het -teken van de volumeregelaar om het volume van uw hoortoestellen te verlagen.

Bij sommige mobiele telefoons kunt u ook de volumeregeling van de telefoon gebruiken om het volume van uw hoortoestel(len) te wijzigen.

Houd er rekening mee dat als u twee hoortoestellen heeft, het volume van beide hoortoestellen wordt aangepast.

**De microfoon(s) van uw hoortoestel(len) tijdelijk in- of uitschakelen** (functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen draadloze hoortoestellen)

---

\*Tenzij ze zijn opgewaardeerd naar de nieuwste software, moeten sommige draadloze hoortoestellen eerst gekoppeld worden met een compatibele afstandsbediening om de afstandsbedieningsfunctie op de Telefoonclip+ te activeren. Dit kunt u doen met uw eigen afstandsbediening of die van uw hoorspecialist. Mute en stereo-streaming is niet beschikbaar op bepaalde modellen hoortoestellen. Vraag uw hoorspecialist om meer informatie.

Druk één keer op de knop mute/unmute (4 op pagina 8) op de voorkant van uw Telefoonclip+.

Om de microfoons van uw hoortoestel weer in te schakelen, drukt u weer één keer op de knop mute/unmute (4 op pagina 8) op de voorkant van uw Telefoonclip+.

### Schakelen tussen de programma's op uw hoortoestel(len)

Druk de programmaknop (3 op pagina 8) in om de beschikbare programma's op uw hoortoestel(len) te doorlopen.

## Gebuikstijd

Het accuverbruik en de gebruikstijd van de Telefoonclip+ zijn in grote mate afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

De accu van de Telefoonclip+ kan honderden malen opnieuw worden opgeladen. Als u merkt dat de gebruikstijd veel korter wordt, neem dan contact op met uw hoorspecialist.

## Uw Telefoonclip+ dragen

Klem de Telefoonclip+ op uw kleding, met de microfoon (7 op pagina 9) naar boven. Zo vangt de microfoon van de Telefoonclip+ uw stem optimaal op tijdens telefoongesprekken.

De Telefoonclip+ heeft een draaibare klem, zodat u kunt zorgen dat de microfoon altijd naar uw mond gericht is.

Uw stemgeluid wordt het beste opgevangen als de Telefoonclip+ 10 tot 30 cm van uw mond af bevestigd is.

### Indicatielampje (LED)

Het indicatielampje bovenop de Telefoonclip+ is multifunctioneel en geeft informatie over de status van uw apparaat.

| Knipperen                                                                        | Betekenis                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Normaal gebruik                               |
|  | Accu bijna leeg                               |
|  | Is aan het opladen                            |
|  | Volledig opgeladen, nog aan de oplader        |
|  | Gereed om te koppelen aan de hoortoestel(len) |
|  | Gereed om te verbinden met Bluetooth-apparaat |
|  | Bluetoothgesprek actief                       |

### Introductie tot Bluetooth

#### *Wat is Bluetooth*

Via Bluetooth kunnen apparaten als mobiele telefoons draadloos met elkaar communiceren.

Controleer eerst of de telefoon die u wilt gebruiken beschikt over Bluetooth. Zoek naar het volgende symbool op het toestel of in de gebruikershandleiding.



Kijk ook naar de mogelijke toepassingen van het Bluetoothapparaat, weergegeven als 'profielen'. Het apparaat dat u wilt gebruiken met de Telefoonclip+ moet de juiste Bluetoothprofielen ondersteunen.

Om een telefoongesprek te ontvangen en te voeren op uw mobiele telefoon, moet het profiel 'handsfree' of 'hoofdtelefoon' ondersteund worden. Veel, maar niet alle mobiele telefoons ondersteunen deze Bluetoothprofielen. Zoek deze informatie in de handleiding van uw mobiele telefoon.

#### *Functioneel bereik Bluetooth*

In een vrije ruimte heeft de Telefoonclip+ een Bluetoothbereik van ongeveer 10 meter. De twee apparaten hoeven niet in een

zichtlijn ten opzichte van elkaar te liggen. De volgende factoren zijn van invloed zijn op het maximumbereik:

- Storing uit de omgeving
- De mobiele telefoon waarmee u verbinding hebt kan een beperkter bereik hebben dan de 10 meter die door de Telefoonclip+ ondersteund wordt.

Als uw mobiele telefoon buiten bereik van de Telefoonclip+ komt, wordt de verbinding beëindigd. Als het apparaat weer binnen bereik komt, zal de Telefoonclip+ de verbinding weer herstellen. Of dit lukt hangt af van de tijd die verstreken is sinds de verbinding verbroken is en van de eigenschappen van de mobiele telefoon.

## Belangrijke informatie



### Onderhoud en zorg

- Reinig de Telefoonclip+ met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (wasmiddel, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Schakel de Telefoonclip+ uit wanneer u deze niet gebruikt en berg hem veilig op.
- Bescherm de Telefoonclip+ tegen een overdaad aan vocht (baden, zwemmen) en hitte (verwarming, autodashboard). Voorkom grote schokken en trillingen.
- Bescherm de microfoon en de oplaadingang tegen stof en vuil. Indien nodig kunt u het bijgeleverde reinigingsborsteltje gebruiken voor het reinigen hiervan.

### Algemene waarschuwingen



- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen
- De Telefoonclip+ gebruikt digitaal gecodeerde overdracht met laag vermogen om met andere draadloze apparaten te communiceren.
- Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Breng de Telefoonclip+ in dat geval buiten bereik van het betreffende apparaat.

- Wanneer u tijdens gebruik van de Telefoonclip+ last hebt van elektromagnetische storing, verwijder dan de storingsbron.
- Vermijd blootstelling aan regen, vocht of andere vloeistoffen om beschadiging van het apparaat of verwondingen van uzelf tegen te gaan.
- Houd het apparaat en alle mogelijke bedrading weg van draaiende machines.
- Als het apparaat oververhit is geraakt, als het gevallen of beschadigd is, als de bedrading of aansluiting beschadigd is, of als het apparaat in een vloeistof gevallen is, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw hoorspecialist.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met lokale standaards en regels.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar.

#### *In brand vliegen in een ontvlambare atmosfeer*

- Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar ontvlambare gassen hangen.

#### *Algemene voorzorgsmaatregelen*

- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is.
- Röntgenstraling, CT-scans en MRI-scans kunnen het functioneren van de Telefoonclip+ nadelig beïnvloeden. We adviseren u het apparaat uit te schakelen voordat u een procedure met gevaarlijke straling ondergaat. Houd het apparaat buiten de kamer.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Als de hoortoestellen niet reageren op de Telefoonclip+ vanwege een ongebruikelijke storing, loop dan weg van het storingsveld.
- Uw hoortoestellen en het apparaat hebben bij het koppelen een unieke netwerkcode gekregen. Dit zorgt ervoor dat het apparaat geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.
- Breng geen veranderingen of modificaties aan op dit apparaat.
- Het openmaken van de Telefoonclip+ kan het apparaat beschadigen. Als er problemen optreden die u niet kunt oplossen, vraag uw hoorspecialist dan om advies.

- De Telefoonclip+ mag alleen gerepareerd worden door een bevoegd servicecenter.
- Gebruik de Telefoonclip+ niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, zoals in vliegtuigen.
- Verbind de Telefoonclip+ alleen met apparatuur waarvoor hij expliciet bedoeld is.

### ONDERHOUD INGEBOUWDE ACCU

*Neem het volgende in acht als uw product een accu bevat.*

- Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
- Optimale prestaties van een nieuwe accu worden pas bereikt nadat deze twee of drie keer volledig opgeladen en weer ontladen is.
- De accu kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij 'opraken'.
- Haal de oplader uit het stopcontact en uit de Telefoonclip+ als hij niet in gebruik is.
- Een volledig opgeladen accu die niet gebruikt wordt, verliest langzamerhand zijn lading.
- Het apparaat achterlaten op hete plaatsen, zoals in een afgesloten auto in de zon vermindert de capaciteit en de levensduur van de accu.

- Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk tijdelijk niet, ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de accu zijn met name beperkt in temperaturen ruim onder het vriespunt.

### Accuwaarschuwing

- Pas op: de accu in dit apparaat kan bij verkeerd gebruik een risico op verbranding opleveren.
- Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen. Deze is ingebouwd en niet-vervangbaar. Bij gebruik van andere accu's is er een risico op brand of explosie en wordt de garantie beëindigd.
- De accu in dit apparaat mag u niet zelf verwijderen of vervangen. Elke poging daartoe is riskant en kan resulteren in schade aan het apparaat.
- Laad de Telefoonclip+ alleen op met een lader die samen met het product geleverd is.
- Voer de accu af in overeenstemming met de lokale reglementen. Recycle waar mogelijk.
- Voer de accu niet af als huishoudelijk afval en gooi hem niet in een vuur, aangezien hij kan exploderen.
- Accu's kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

Opladen:



*Neem het onderstaande in acht als er een oplader wordt geleverd bij het apparaat.*

- Laad de Telefoonclip+ alleen op met de meegeleverde AC adapter. Gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn. Gebruik van andere opladers kan alle rechten op garantie beëindigen.
- Raadpleeg uw hoorspecialist of er goedgekeurde alternatieven verkrijgbaar zijn.
- Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

*Oplader-waarschuwing!*



- Als u de voedingskabel of een andere kabel wilt losmaken, trek deze er dan uit aan de aansluitplug, niet aan de kabel.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader.
- Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen omdat u zich dan een gevaarlijke elektrische schok kunt krijgen.
- Het incorrect weer in elkaar zetten kan tijdens het gebruik een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.

- Laad de Telefoonclip+ niet op in extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.
- U mag de Telefoonclip+ niet opladen terwijl u hem draagt.



## Technische specificaties

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Operationeel bereik: | tot 3 m       |
| Draadloos:           | 2.4 GHz       |
| Gebruikstemperatuur: | 0 tot 45 °C   |
| Laadtemperatuur:     | 0 tot 45 °C   |
| Opbergtemperatuur:   | -20 tot 45 °C |

## Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25 ° C en 70 ° C, conform interne- en industriestandaarden.

## Garantie

De Telefoonclip+ heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.

## Wat dekt de garantie?

Elk elektrisch onderdeel dat door montage-, fabricage-, of ontwerpfouten, bij normaal gebruik gedurende de looptijd van de fabrieksgarantie, niet naar behoren functioneert, wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. U dient de Telefoonclip+ hiervoor terug te brengen naar het verkooppunt.

Als blijkt dat een reparatie niet haalbaar is, kan het gehele apparaat vervangen worden door een vergelijkbaar apparaat. Uiteraard na wederzijds akkoord van u en uw hoorspecialist.

### **Wat is niet gedekt door de garantie?**

Problemen ten gevolge van onjuiste behandeling of onderhoud, buitensporig gebruik, ongevallen, reparaties uitgevoerd door een onbevoegde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden of schade ten gevolge van vreemde voorwerpen in het apparaat zijn NIET gedekt door de beperkte garantie en maken de garantie mogelijk zelfs ongeldig. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw hoorspecialist kan een garantie afgegeven hebben die verder gaat dan de bepalingen in deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorspecialist voor meer informatie.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Datum van aankoop: \_\_\_\_\_

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

| PROBLEEM                                                                                                                                      | OORZAAK                                                                                                                                                                           | MOGELIJKE OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>De Telefoonclip+ reageert niet op het (kort of lang) indrukken van de knop voor het beantwoorden of beëindigen van een telefoongesprek</i> | De accu van de Telefoonclip+ is leeg                                                                                                                                              | Laad de accu op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>De koppelknop op de Telefoonclip+ is ingedrukt, maar ik hoor geen melodietje in mijn hoortoestel nadat de batterijlade is gesloten</i>     | <p>De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn buiten elkaars draadloos bereik</p> <p>De Telefoonclip+ en de hoortoestellen hebben niet gelijktijdig in de koppelmodus gestaan</p> | <p>Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden en herhaal de koppelprocedure.</p> <p>Herhaal de koppelprocedure en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de koppelknop op de Telefoonclip+ is ingedrukt.</p> |
| <i>De Telefoonclip+ wordt niet gevonden door de mobiele telefoon in het Bluetooth-menu</i>                                                    | <p>De Telefoonclip+ en de mobiele telefoon bevinden zich buiten elkaars draadloze bereik</p> <p>De Telefoonclip+ staat niet in de Bluetoothmodus</p>                              | <p>Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon zich binnen elkaars draadloze bereik bevinden en herhaal de verbindingsprocedure</p> <p>De Telefoonclip+ staat 120 seconden in de Bluetooth verbindingsmodus nadat deze geactiveerd is. Herhaal de Bluetooth verbindingsprocedure</p>                                        |

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

| PROBLEEM                                                                                                                               | OORZAAK                                                                                                   | MOGELIJKE OPLOSSING                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Het koppelen met een telefoon met Bluetooth is mislukt</i>                                                                          | De Telefoonclip+ heeft de Bluetoothmodus uitgeschakeld voordat de mobiele telefoon klaar was met koppelen | Herhaal de Bluetooth-verbindingsprocedure en zorg ervoor dat het proces binnen 120 seconden na activering ervan in de Telefoonclip+ afgerond is                                                  |
|                                                                                                                                        | Er is een verkeerde 4 cijferige pincode ingevoerd                                                         | Herhaal de Bluetooth-verbindingsprocedure. Als er gevraagd wordt om een pincode, voer dan 0000 (vier nullen) in                                                                                  |
| <i>De mobiele telefoon gaat over maar het lampje op de Telefoonclip+ knippert niet, en ik hoor geen beltoon in mijn hoortoestellen</i> | De Telefoonclip+ is uitgeschakeld                                                                         | Zet de Telefoonclip+ aan.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                        | De Telefoonclip+ en mobiele telefoon zijn niet gekoppeld                                                  | Maak via de Bluetooth-verbindingsprocedure verbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon                                                                                             |
|                                                                                                                                        | De Bluetooth-verbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon is verbroken                       | Zorg dat Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld en maak weer een Bluetoothverbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon: druk kort op de telefoonknop van de Telefoonclip+ |
|                                                                                                                                        |                                                                                                           | Voor details over de werking van Bluetooth op de mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding van uw telefoon                                                                            |

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

| PROBLEEM                                                                                                                                  | OORZAAK                                                                                                                                                                                                     | MOGELIJKE OPLOSSING                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>De mobiele telefoon gaat over en het lampje op de Telefoonclip+ knippert, maar ik hoor geen beltoon in één of beide hoortoestellen</i> | <p>De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn niet binnen elkaars draadloos bereik</p> <p>De accuspanning in het hoortoestel kan dusdanig laag zijn dat het de digitale streaming niet meer ondersteunt</p> | <p>Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden.</p> <p>Vervang de batterij in het hoortoestel.</p>                                                           |
| <i>Degene met wie ik telefoneer hoort mijn stem niet duidelijk</i>                                                                        | De microfoon van de Telefoonclip+ vangt uw stem niet goed op                                                                                                                                                | Zorg dat de microfoon van de Telefoonclip+ dicht bij uw mond zit en dat de Telefoonclip+ niet tegen uw kleding wrijft tijdens het gesprek.                                                                                 |
| <i>Het geluid van het hoortoestel is te hard of te zacht</i>                                                                              | Het volume van het geluid door de telefoon is niet geschikt om naar te luisteren                                                                                                                            | Wijzig het volume op de mobiele telefoon tot het geluid goed is, of pas het volume aan met de toetsen '+' en '-' op de Telefoonclip+. Als alternatief kunt u eventueel de volumeregelaar op uw hoortoestel(len) gebruiken. |
| <i>U hoort geen geluid in het hoortoestel, hoewel hij wel op het telefoonprogramma staat</i>                                              | De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn niet binnen elkaars draadloos bereik                                                                                                                             | Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden.                                                                                                                 |

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door.



**WAARSCHUWING** wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.

**VOORZORGSMATREGEL** wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen



Advies en gebruikerstips over uw draadloze accessoire.



Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht.

Nominale verzonden RF-uitgangsvoeding is 13.3 dBm.



Dit product valt onder Type B contactonderdelen.



De 'Made for iPhone'-badge betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen om specifiek te verbinden met een iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en voldoet aan de Apple-normen. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor de naleving van veiligheids- en wetgevende reguleringen. Gebruik van deze accessoire met iPhone kan van invloed zijn op de draadloze prestaties.



Vraag uw hoorspecialist naar het afvoeren van uw draadloze accessoires

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en logo Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Android is een handelsmerk van Google Inc.

Geproduceerd conform  
EU Medische richtlijn 93/42/EEG:

**Internationaal Hoofdkantoor**

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Tel.: +45 4575 1111

CVR-nr. 55082715



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten  
93/42/EEG, of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen  
gericht te worden aan GN Hearing A/S.