

HANDLEIDING

Afstandsbediening 2



Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Afstandsbediening 2.

Met de Afstandsbediening 2 kunt u uw draadloze hoortoestellen bedienen. Het is een elegante en gebruiksvriendelijke afstandsbediening met een statusdisplay, waarmee u draadloos toegang heeft tot de functies op uw hoortoestellen.

Met de Afstandsbediening 2 kunt u beide hoortoestellen tegelijk bedienen. U kunt de hoortoestellen ook afzonderlijk bedienen, zodat u ze perfect kunt afstemmen op een specifieke hoorsituatie.

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw Afstandsbediening 2. Raadpleeg uw hoorspecialist bij overige vragen.

Lees voor uw veiligheid aandachtig het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 31 tot 35 door.

FCC ID: X26RC-2

Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels.

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die leidt tot ongewenste werking van het apparaat.

LET OP: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan Klasse B digitale apparatuur worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- Dit apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger.
- De verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Gebruiksbestemming

De Afstandsbediening 2 is bedoeld om draadloze hoortoestellen op afstand te bedienen. De belangrijkste functie van de Afstandsbediening 2 is het zenden van signalen naar draadloze hoortoestellen, waarmee het volume en het programma kan worden aangepast.

Deze producten zijn in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

In de EU: het toestel voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD).

Hierbij verklaart GN Hearing A/S dat de radioapparatuurtype(n) RC-2 voldoet/voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is in te zien op het volgende internetadres: declarations.resound.com

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd onder de regels van ISSED.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.


Voldoet aan Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving. Dit toestel is goedgekeurd conform de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit toestel mag niet gemodificeerd worden (anders wordt het toegekende bestemmingsnummer ongeldig).

Inhoud


Beschrijving	8
Van start met uw Afstandsbediening 2	10
Het volume aanpassen	12
Basisinstellingen herstellen	14
Waarschuwing lage accuspanning	15
Operationeel bereik.....	17
Display	18
Werking Afstandsbediening 2	18
Koppelen aan uw hoortoestellen.....	19
Optionele audiostreamers gebruiken	21
Streaming activeren van een TV Streamer	22
Volume aanpassen in streamingmodus	24
Telefoon (optioneel)	27
Bijlage: uitzonderingen op normaal gebruik	28
Belangrijke informatie.....	31
Technische specificaties	36
Garantie	37
Oplossen van problemen.....	40
Opmerkingen.....	46

Beschrijving

- 1 Aan-/uitschakelaar
- 2 Display
- 3 Streaming (met optionele TV Streamer of Micro Mic)
- 4 HOME
- 5 Muteknop voor hoortoestelmicrofoon

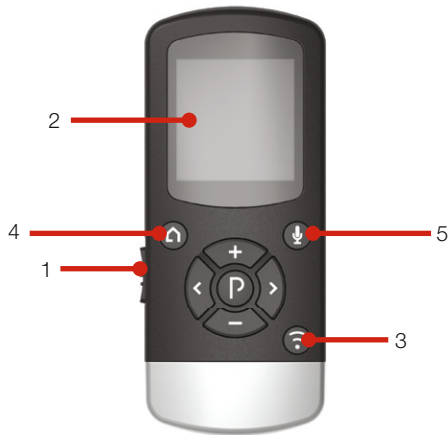

- 6 Volume omhoog
- 7 Volume omlaag
- 8 Alleen linkerhoortoestel selecteren
- 9 Alleen rechterhoortoestel selecteren
- 10 Programma wijzigen
- 11 Koppelen

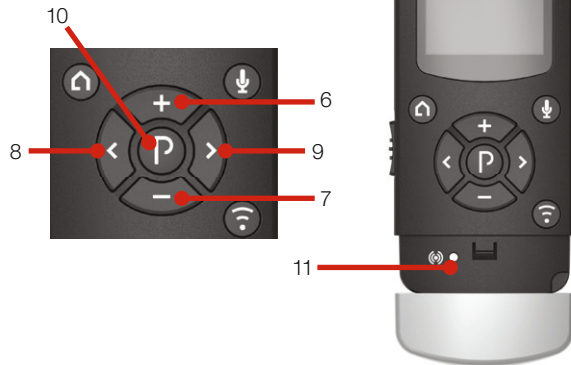

Van start met uw Afstandsbediening 2

Batterij opladen

Voordat u de Afstandsbediening 2 kunt gebruiken, moet u de oplaadbare accu volledig opladen. Sluit het oplaadsnoer aan zoals weergegeven op de tekening. Steek daarna de stekker in het stopcontact. Tijdens het laden worden op de accumeter voortdurend één, twee of drie balken weergegeven. Als de accu volledig opgeladen is, worden de drie balken continu weergegeven.



Uw Afstandsbediening 2 in- en uitschakelen

Afstandsbediening 2 aanzetten: schuif de aan-/uitschakelaar (1 op pagina 8) naar de positie AAN. Een wit 'I'-streepje wordt zichtbaar onderaan de schakelaar en het scherm gaat aan.

Afstandsbediening uitzetten: schuif de Aan-/uitschakelaar naar de positie UIT.



Laad de Afstandsbediening 2 niet op terwijl u deze op het lichaam draagt.


Van programma wisselen

U kunt de knop 'P' (10 op pagina 9) gebruiken om te wisselen tussen de programma's die uw hoorspecialist in uw hoortoestellen geprogrammeerd heeft. De naam van het programma kan door uw

hoorspecialist ingesteld worden. Met elke druk op de knop 'P' gaat het programma één stap verder, om aan het eind van de cyclus terug te keren naar programma 1 (bijv. 1, 2, 3, 1). Iedere keer als u naar een ander programma schakelt, hoort u een of meer pieptonen in beide hoortoestellen en wordt het programma dat in gebruik is op het scherm weergegeven. Uw hoorspecialist kan deze functie ook uitschakelen tijdens de aanpassing. Voor de beste prestaties wordt aanbevolen beide hoortoestellen in te stellen op hetzelfde programma.



Programma 1 'Basis'

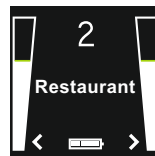

Programma 2 'Restaurant'

Het volume aanpassen

Het volume in beide hoortoestellen aanpassen

U kunt het volume aanpassen met de toetsen '+' en '-' (6 en 7 op pagina 9). Dit kan voor beide hoortoestellen tegelijk of aan iedere kant afzonderlijk. Standaard zijn beide hoortoestellen 'actief'. Dit ziet u aan de twee pijltjes (< en >) naast de volumebalken op het scherm. U kunt beide hoortoestellen tegelijkertijd harder zetten door op de knop '+' te drukken of zachter door op de knop '-' te drukken. Iedere aanpassing wordt aangegeven door een pieptoon in beide hoortoestellen, als dit niet is uitgeschakeld door uw hoorspecialist tijdens de aanpassing. Daarnaast wordt de weergave van de volumebalken op het scherm aangepast. Het standaard volumeniveau wordt aangegeven door een horizontale groene lijn in de volumebalken.



Alleen het volume in het linkerhoortoestel aanpassen

Druk eerst op de toets '<' op het toetsenbord (8 op pagina 9). Zo wordt het linkerhoortoestel geactiveerd en het rechterhoortoestel gedeactiveerd. Dit wordt aangegeven door een pijltje naar links (<) in het scherm, en het pijltje naar rechts wordt inactief. Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan de rechterkant. Druk nu op '+' of '-' om alleen het volume in het linkerhoortoestel aan te passen.



Alleen het volume in het rechterhoortoestel aanpassen

Om alleen het volume aan de rechterkant aan te passen, drukt u eerst op de toets '>' op het toetsenbord (9 op pagina 9). Zo wordt het rechterhoortoestel geactiveerd en het linkerhoortoestel gedeactiveerd. Dit wordt aangegeven door een pijltje naar rechts (>) in het scherm, het pijltje naar links wordt inactief. Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan de linkerkant. Druk nu op '+' of '-' om alleen het volume van het rechterhoortoestel aan te passen.



Om terug te keren naar de aanpassingsmodus voor beide toestellen tegelijk, drukt u op de toets < of > (8 of 9 op pagina 9) op het toetsenbord, totdat u beide pijltjes tegelijkertijd ziet. Nu is de afstandsbediening voor beide hoortoestellen actief.



Let op: als synchronisatie tussen apparaten in uw hoortoestellen is ingeschakeld, worden individuele volumeaanpassingen automatisch in het linker- én rechtertoestel gedaan.

Mute/Unmute (Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen draadloze hoortoestellen)

U kunt de microfoons van het hoortoestel op stil zetten en weer inschakelen door op de muteknop (5 op pagina 8) te drukken op de Afstandsbediening 2. Het op stil zetten of weer

inschakelen geldt voor beide hoortoestellen tegelijk en kan niet worden geselecteerd voor alleen het linker- of rechtoestel.

Als de microfoons op stil staan,  ziet u in plaats van het microfoonicoontje hetzelfde icoontje  met een streep erdoor en zijn de volumebalken gedimd. Druk nogmaals op de muteknop om de microfoons van het hoortoestel weer in te schakelen.

Streaming activeren

Als u gebruik maakt van een optionele streamer zoals de TV Streamer of Multi Mic, dan kunt u ze activeren door op de streamingknop te drukken (3 op pagina 8). Zie ook het hoofdstuk over het gebruik van optionele streamingapparaten.

Basisinstellingen herstellen

De instellingen die gelden als de hoortoestellen aangezet worden, kunt u activeren door op de HOMEknop te drukken (4 op pagina 8):


- Activeert programma 1 in beide hoortoestellen
- Zet beide hoortoestellen terug naar standaard volume-instellingen

Met de knop HOME worden ook alle gestreamde audiosignalen van de optionele streamingapparaten beëindigd..

Waarschuwing lage accuspanning

Waarschuwing lage accuspanning Afstandsbediening 2

Het batterijniveau van de Afstandsbediening 2 wordt weergegeven door een accumeter met drie balken. Als de accu gebruikt wordt, verdwijnen de balken één voor één bij het leger worden van de accu. Als de accu bijna leeg is, knippert de accumeter om aan te geven dat de accu opgeladen moet worden.

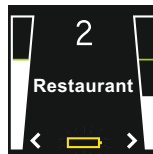

Accu bijna leeg
Afstandsbediening 2

Waarschuwing lage batterijspanning hoortoestel

Als de hoortoestellen bijna leeg zijn, wordt dit weergegeven op het display van de Afstandsbediening 2, naast de volumebalk(en). De pijltjes voor het linker- (<) of rechter- (>)toestel wisselen tussen een pijl en een verticale batterijweergave om aan te geven of het linker- of rechertoestel bijna leeg is.



Batterij bijna leeg in linkerhoortoestel



Batterij bijna leeg in rechterhoortoestel


Bij een lage spanning kunnen de Afstandsbediening 2 en andere draadloze apparaten slechter gaan functioneren. De resterende batterijduur is afhankelijk van het soort hoortoestel en de gebruiksmodus. Om te blijven profiteren van volledige werking, kunt u het beste direct na de waarschuwing van lage batterijspanning nieuwe batterijen plaatsen.

Operationeel bereik


Het operationeel bereik tussen de Afstandsbediening 2 en de hoortoestellen is ongeveer 1 meter. Als u de status niet op de Afstandsbediening 2 kunt aflezen, houd hem dan voor uw borst, zoals weergegeven op de afbeelding.



Als de Afstandsbediening 2 de status van de hoortoestellen niet kan vinden, verschijnen er zoekpictogrammen  op het display. Houd de Afstandsbediening 2 vast zoals afgebeeld om contact te maken met beide hoortoestellen.

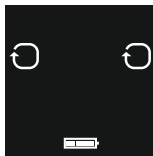

Verbinding zoeken voor beide hoortoestellen

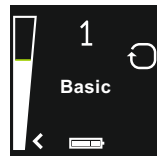

Verbonden met linkerhoortoestel en zoeken naar rechterhoortoestel

Display

Om de batterij te sparen, heeft de Afstandsbediening 2 een standby-functie. Hiermee schakelt het apparaat automatisch in de slaapstand als het display 20 seconden niet gebruikt is. Als het display zwart is, druk dan op het toetsenbord om het scherm te activeren en voer daarna de gewenste handeling uit.

Werking Afstandsbediening 2

De Afstandsbediening 2 werkt het beste als u de toetsen één voor één indrukt, in plaats van heel snel achter elkaar. Als u bijvoorbeeld het volume wilt wijzigen, drukt u kort op een knop en wacht u even op de pieptonen* voordat u weer doorgaat. Deze tip geldt voor alle toetsen, maar is vooral van toepassing op de volumeaanpassing.

** Let op: deze tonen kunnen uitgeschakeld zijn door uw hoorspecialist tijdens het aanpassen.*


Koppelen aan uw hoortoestellen



Let op: de volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw hoorspecialist, die meestal de handelingen uitvoert die nodig zijn om de Afstandsbediening 2 te laten werken met uw hoortoestel. Het proces is echter eenvoudig en kan door bijna iedereen worden uitgevoerd.

Koppelen is het instellen van een exclusieve communicatie tussen uw hoortoestellen en uw Afstandsbediening 2. Uw hoorspecialist kan deze koppeling doen tijdens de aanpassing van uw hoortoestel. U kunt ook zelf onderstaande stappen volgen om uw hoortoestel te koppelen aan de Afstandsbediening 2.

1. Zorg dat de Afstandsbediening 2 volledig is opgeladen en is ingeschakeld. Uw hoortoestellen moeten uitgeschakeld zijn: open de batterijlades.
2. Druk eenmaal op de koppelknop op de Afstandsbediening 2 (11 op pagina 9). De koppelmodus is nu 20 seconden actief.
3. Nu de koppelmodus actief is, sluit u de batterijlade van beide hoortoestellen en controleert u of ze aan staan.

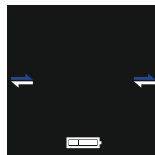

Hoortoestellen
zoeken

4. Een succesvolle koppeling herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen. Ook ziet u op het display van de Afstandsbediening 2 actieve volumebalken en Programma '1' staan (zie onder). U kunt nu de Afstandsbediening 2 gebruiken!



Hoortoestellen in programma 1

Optionele audiostreamers gebruiken

De TV Streamer 2 en de Multi Mic zijn optionele audio- en streamingapparaten voor uw hoortoestellen.

De TV Streamer 2 verzendt audiosignalen van uw televisie, stereoinstallatie, pc, etc. rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

De Multi Mic streamt spraak- en audiosignalen rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

Om audio te streamen van de TV Streamer 2 of Multi Mic, drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8) op de Afstandsbediening 2. De hoortoestellen gaan nu uw streamer zoeken.



Streaming activeren van een TV Streamer 2

Wilt u het streamen van de televisie, stereo of een ander apparaat dat is aangesloten op de TV Streamer 2 starten? Zet dan het audio-apparaat aan en drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8). De hoortoestellen beginnen direct te zoeken naar de TV Streamer 2 en maken verbinding.



Zoeken naar de TV-streamer 2



Verbonden met de TV-streamer 2



TV-streamer niet gevonden

U kunt maximaal 3 streamingapparaten verbinden met uw hoortoestellen. Iedere streamer heeft op de Afstandsbediening een eigen letter: A, B of C. Als er meerdere streamingapparaten in gebruik zijn, druk dan net zo lang op de streamingknop tot u het gewenste audiosignaal hoort.

Volume aanpassen in streamingmodus

(Beperkte functionaliteit voor bepaalde draadloze hoortoestellen. Zie de paragraaf Volume aanpassen in streamingmodus' als uw hoortoestel deze functie niet ondersteunt).

Als de streamingmodus is ingeschakeld, zijn de volumeaanpassingen van beide hoortoestellen (linkervolumebalk) en van de gestreamde audio (rechtervolumebalk) beide standaard 'actief'. Dit ziet u aan de twee pijltjes (< en >) naast de volumebalken op het scherm. Om zowel het volume van het hoortoestel als het audio-volume tegelijkertijd aan te passen, drukt u op de toets '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) op de Afstandsbediening 2.

Let op: als u twee hoortoestellen gebruikt wordt iedere volume-aanpassing toegepast op beide hoortoestellen tegelijk.

Het is ook mogelijk om individuele volumeaanpassingen aan de hoortoestellen en het gestreamde audiosignaal te doen.


Alleen volume hoortoestellen aanpassen



Om het volume van de hoortoestellen aan te passen, drukt u op de toets '<' op het toetsenbord (8 op pagina 9). Nu ziet u twee pijltjes '< >' naast de volumebalk van het hoortoestel: het volume van de gestreamde audio wordt gedimd.

Druk op '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) om het volume van de hoortoestellen aan te passen.

Om terug te keren naar de gelijktijdige aanpassingsmodus, drukt u op de toets '>' (9 op pagina 9) op het toetsenbord tot er één pijltje naast iedere volumebalk in het scherm staat, wat aangeeft dat de volumeniveaus 'actief' zijn.

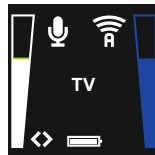

Alleen volume gestreamde audio aanpassen



Om het volume van de gestreamde audio aan te passen, drukt u op de toets ">" op het toetsenbord (9 op pagina 9). Nu ziet u twee pijltjes '< >' naast de volumebalk van de gestreamde audio en het volume van de 'hoortoestellen' wordt gedimd.

Druk op '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) om het volume van de gestreamde audio aan te passen.

Om terug te keren naar de modus voor gelijktijdige aanpassing, drukt u op de toets '<' (8 op pagina 9) op het toetsenbord tot er één pijltje verschijnt naast iedere volumebalk op het scherm, wat aangeeft dat beide volumeniveaus 'actief' zijn.



Volumeaanpassingen basis streamingmodus

Als uw hoortoestellen geen individuele aanpassing van het hoortoestelvolume en gestreamd audiovolume ondersteunen, wordt de volumeaanpassing alleen toegepast op het gestreamde audiosignaal.

Pas zo nodig het volume aan met de toetsen '+' en '-' (6 en 7 op pagina 9). Het volume van het gestreamde audiosignaal kan ook afzonderlijk worden aangepast voor het linker- of rechertoestel met de knoppen < of > (8 of 9 op pagina 9).

Om het streamen te stoppen en terug te keren naar het vorige programma, drukt u op de knop 'P' (10 op pagina 9). U kunt ook op de HOMEknop (4 op pagina 8) drukken, waarmee de hoortoestellen worden ingesteld op standaardinstellingen (zie paragraaf 'Terug naar standaardinstellingen').

Telefoon (optioneel)

De Telefoonclip+ of AutoPhone werken ook in combinatie met de Afstandsbediening 2. Als u de Telefoonclip+ of AutoPhone gebruikt, wordt dit op het scherm weergegeven.

Als het telefoongesprek beëindigd is, keren de hoortoestellen weer terug naar het vorige programma. Dat programma wordt weergegeven op het scherm van de Afstandsbediening 2. Volumeaanpassingen die tijdens het telefoongesprek gedaan worden, worden niet overgenomen in het vorige programma.

Door een telefoongesprek wordt het streamen van de streaming-apparaten tijdelijk onderbroken, dit wordt weer hervat als het telefoongesprek beëindigd is.



Bijlage: uitzonderingen op normaal gebruik

Wij raden aan om beide toestellen altijd in hetzelfde programma te zetten. Twee verschillende programma's is echter wel mogelijk: bijvoorbeeld programma 1 aan de linkerkant en gestreamde audio aan de rechterkant. In dit geval werkt de Afstandsbediening 2 iets anders, zoals te zien is in de volgende voorbeelden.

Situatie 1: U gebruikte eerst in beide oren programma 1, maar heeft met behulp van de drukknop op het rechertoestel de rechterkant ingesteld op programma 2. Als u nu op de knop 'P' op de Afstandsbediening 2 drukt, schakelt het linkertoestel naar programma 2, net als uw rechertoestel. Als u nu nog vaker op de toets 'P' drukt, wordt het programma aan beide kanten gelijktijdig gewijzigd.

Situatie 2: U heeft uw linkerhoortoestel ingesteld op programma 1 en het rechter op programma 2. Als u nu op de knop Streaming drukt, ontvangen uw beide hoortoestellen gestreamd geluid uit dezelfde bron (bijvoorbeeld de TV). Als u nu op de knop P drukt, wordt de streaming aan beide kanten uitgeschakeld en keren uw beide hoortoestellen terug naar hun vorige programma (programma 1 en programma 2).

Situatie 3: Op uw linkerhoortoestel is programma 1 actief maar u heeft door de knop op uw rechterhoortoestel in te drukken voor de rechterkant streaming geactiveerd. Als u nu op de knop

P drukt, keert uw rechterhoortoestel terug naar het programma dat daarvoor actief was en uw linkerhoortoestel gaat naar het volgende programma. Door nogmaals op de knop 'P' te drukken, worden beide hoortoestellen weer naar hetzelfde programma geschakeld.

Als u in plaats daarvan op de knop Streaming drukt, worden uw beide hoortoestellen ingesteld op hetzelfde gestreamde audio-programma.

Situatie 4: beide hoortoestellen zijn ingesteld op programma 1, maar u gebruikt voor uw linkeroor de functie Auto Phone. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop 'P' drukt, schakelt de rechterkant over op programma 2, wat geen invloed heeft op uw telefoongesprek. Na het gesprek blijft uw linkertoestel in programma 1. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop Streaming drukt, wordt alleen aan de rechterkant streaming gestart, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.

Situatie 5: u heeft de streaming middels de Streamingknop geactiveerd voor beide oren, maar gebruikt links de functie Auto Phone. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop 'P' drukt, wordt de streaming aan de rechterkant gestopt, wat geen invloed heeft op uw telefoongesprek. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop Streaming drukt, schakelt de streaming aan de rechterkant over op het volgende streamingprogramma, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.

Situatie 6: als uw hoortoestellen in verschillende hoortoestelprogramma's staan, wordt alleen het programmanummer voor ieder hoortoestel weergegeven. Er wordt geen programmalabel/naam weergegeven.

Situatie 7: als er één hoortoestel in streamingmodus staat en de andere in een hoortoestelprogramma, dan wordt alleen de streamingweergave getoond, zonder programmanummer of label/naam.

Belangrijke informatie



Onderhoud en zorg

- Maak de Afstandsbediening 2 schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (wasmiddel, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Bescherm de Afstandsbediening 2 tegen overmatig vocht (douchen, zwemmen) en warmte (verwarming, autodashboard).
- Voorkom grote schokken en trillingen.



Algemene waarschuwingen

- Houd de Afstandsbediening 2 buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- De Afstandsbediening 2 gebruikt digitaal gecodeerde overdracht met laag vermogen om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Breng de Afstandsbediening 2 in dit geval buiten bereik van het betreffende apparaat.
- Wanneer u tijdens gebruik van de Afstandsbediening 2 last hebt van elektromagnetische storing, loop dan weg van de storingsbron.



- Uw hoortoestel en de Afstandsbediening 2 hebben tijdens de aanpassing een unieke netwerkcode meegekregen. Dit zorgt ervoor dat het apparaat geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Breng geen veranderingen of modificaties aan op de Afstandsbediening 2.
- Het volledig openen van de Afstandsbediening 2 kan het apparaat beschadigen. Als zich problemen voordoen die u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw hoorspecialist.
- De Afstandsbediening 2 mag alleen gerepareerd worden door een geautoriseerd servicecenter.
- Gebruik de Afstandsbediening 2 niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, zoals in vliegtuigen.
- Koppel de Afstandsbediening 2 alleen met apparaten waar hij expliciet voor bedoeld is.



Neem s.v.p. het onderstaande in acht:

- Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
- Een nieuwe accu presteert pas optimaal nadat hij twee of drie keer volledig opgeladen en weer ontladen is.
- De accu kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij 'opraken'.
- Haal de oplader uit het stopcontact en ontkoppel hem van de Afstandsbediening 2 als hij niet in gebruik is.
- Als hij niet gebruikt wordt, verliest een volledig opgeladen accu na verloop van tijd zijn lading.
- Als u het apparaat op hete plaatsen achterlaat, zoals in een afgesloten auto in de zon, neemt de capaciteit en de levensduur van de accu af.
- Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk tijdelijk niet, ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de accu zijn met name beperkt in temperaturen ruim onder het vriespunt.

Accuwaarschuwing



- Let op: de batterij die voor dit product gebruikt wordt, kan bij verkeerd gebruik een risico tot brand of chemische brandwonden vormen.
- Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen. Deze is ingebouwd en is niet vervangbaar. Het gebruik van andere accu's geeft een risico op vuur of ontploffing en de garantie is in dat geval niet meer geldig.
- De accu in uw apparaat mag u niet verwijderen of vervangen. Elke poging daartoe is riskant en kan schade aan het apparaat veroorzaken.
- Laad de Afstandsbediening 2 alleen op met de bijgeleverde oplader.
- Ruim de accu op in overeenstemming met de lokale reglementen. Hergebruik hem indien mogelijk.
- Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval of in een vuur, omdat hij kan exploderen.
- Accu's kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

Onderhoud oplader



Neem s.v.p. het onderstaande in acht als er een oplader wordt geleverd bij het apparaat.

- Laad uw product alleen op met de meegeleverde AC-adapter. Gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn.
- Gebruik van andere opladers kan alle rechten op garantie beëindigen.
- Om na te gaan of er goedgekeurde alternatieven beschikbaar zijn, gaat u naar uw hoorspecialist.
- Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

Waarschuwing oplader



- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
- Gebruik nooit een beschadigd snoer. Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen omdat u dan een gevaarlijke elektrische schok kunt krijgen.
- Het incorrect weer in elkaar zetten kan tijdens het gebruik een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.
- Laad niet op in extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.

Technische specificaties

Operationeel bereik:	tot 3 m
Draadloos:	2.4 GHz
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur:	-20 tot 60 °C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25° C en 70° C, conform interne- en industriestandaarden.

Garantie

De Afstandsbediening 2 heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Een elektrisch apparaat dat door montage-, fabricage-, of ontwerpfouten, bij normaal gebruik gedurende de looptijd van de fabrieksgarantie, niet naar behoren functioneert, wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. U dient de Afstandsbediening 2 hiervoor terug te brengen naar het verkooppunt. Als blijkt dat een reparatie niet haalbaar is, kan het gehele apparaat vervangen worden door een vergelijkbaar apparaat. Uiteraard na wederzijds akkoord van u en uw hoorspecialist.

Wat is niet gedekt door de garantie?

Problemen ten gevolge van onjuiste behandeling of onderhoud, overmatig gebruik, ongevallen, reparaties uitgevoerd door een onbevoegde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden of schade ten gevolg van vreemde voorwerpen in het apparaat zijn NIET gedekt door de beperkte garantie en maken de garantie mogelijk zelfs ongeldig. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw hoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder gaat dan onze bepalingen. Neem hierover contact op met uw hoorspecialist.

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het display licht niet op als ik op een toets op de Afstandsbediening 2 druk</i>	De Afstandsbediening 2 is uitgeschakeld De accu van de Afstandsbediening 2 is leeg	Zet de Afstandsbediening 2 aan: schuif de Aan-/uitschakelaar naar AAN Laad de accu op
<i>Ik zie geen informatie op het display als ik het activeer met op een toets op de Afstandsbediening 2 te drukken</i>	De Afstandsbediening 2 en de hoortoestellen zijn niet gekoppeld	Voer de koppelprocedure uit
<i>Ik druk de koppelknop op de Afstandsbediening 2 in, maar het pictogram 'zoeken' op het display, wordt niet vervangen door de status van het hoortoestel</i>	De Afstandsbediening 2 en het hoortoestel bevinden zich buiten elkaars draadloze bereik De Afstandsbediening 2 en de hoortoestellen stonden niet tegelijkertijd in de koppelmodus	Verzekert u ervan dat de Afstandsbediening 2 en de hoortoestellen binnen elkaars draadloos bereik zijn en herhaal de koppelprocedure. Herhaal de koppelprocedure en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de koppelknop op de Afstandsbediening 2 ingedrukt is.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het pictogram 'zoeken' wordt voortdurend weergegeven op het display van de Afstandsbediening 2</i>	De Afstandsbediening 2 en het hoortoestel bevinden zich buiten elkaars draadloos bereik	Controleer of de Afstandsbediening 2 en de hoortoestellen binnen elkaars raadloos bereik zijn
	Het hoortoestel staat uit	Zet het hoortoestel aan
	De batterij in het hoortoestel is leeg	Vervang de batterij in het hoortoestel
<i>Er worden twee verschillende programmanummers of icoontjes op het display weergegeven</i>	De twee hoortoestellen staan niet in hetzelfde programma. Omdat een van de hoortoestellen buiten het draadloos bereik was toen er een commando gegeven werd vanaf de Afstandsbediening 2.	Zorg dat de hoortoestellen in hetzelfde programma staan, met behulp van de Afstandsbediening 2 of via de programmaknop op het hoortoestel
	Of u hebt het programma op een van de hoortoestellen veranderd door op de programmaknop te drukken	<i>Let op:</i> door interne prioriteiten heeft dit commando geen effect op een hoortoestel dat in het telefoonprogramma staat (u ziet telefoonicoontje op het display van de Afstandsbediening 2)

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Als ik het volume op de hoortoestellen aanpas met de toets '+' of '-', verandert het volume niet</i>	De volumeregeling wordt slechts voor één hoortoestel geactiveerd (u ziet op het display van de Afstandsbediening 2 slechts een van de pijltjes '<' of '>')	Druk op de toets '<' of '>' om de volumeregeling ook voor het andere hoortoestel te activeren

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door.



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.

VOORZORGSMAATREGEL wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.



Advies en tips over het gebruik van uw draadloze accessoire.



Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht.

Nominale verzonden RF-uitgangsvermogen is 3,4 dBm.



Dit product valt onder Type B contactonderdelen.



Vraag uw hoorspecialist naar de juiste wegwerpmethode van de accessoire.

Geproduceerd conform
EU Medische richtlijn 93/42/EEG:

Internationaal Hoofdkantoor

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Tel.: +45 4575 1111

CVR-nr. 55082715



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten
93/42/EEG, of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen
gericht te worden aan GN Hearing A/S.