

Používateľská príručka pre aplikáciu



Interton.com

Úvod

Aplikácie Interton boli vyrobené na zlepšenie vášho pocitu z načúvania a na umožnenie čo najlepšieho využitia vašich načúvacích prístrojov Interton.

Inovačná technológia zvuku a dizajnu Interton sa odráža v celom sortimente načúvacích prístrojov, vďaka čomu je počúvanie ešte príjemnejšie. Načúvacie prístroje sú dostupné výlučne prostredníctvom audiológov a odborníkov pre starostlivosť o sluch.

Aplikácie Interton vám umožnia ešte lepšie využiť svoje načúvacie prístroje, lebo získate nové možnosti na kontrolu, personalizáciu a podporu.

Ďalšie informácie a pomoc s aplikáciami získate na stránke:
www.interton.com

Ak si želáte tlačенú verziu tejto používateľskej príručky pre aplikácie, obráťte sa na podporu zákazníkom alebo si ju jednoducho vytlačte.



Nájdenie a inštalácia aplikácie



Získajte aplikácie pre iPhone, iPad a iPod touch – stiahnite si ich z App Store podľa týchto krokov:

1. Vstúpte do App Store klepnutím na ikonu App Store  na zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod touch.
2. V App Store vyhľadajte „Interton“ a názov aplikácie
3. Ak používate iPad, zmeňte kritériá hľadania v ľavom hornom rohu na „iPhone only“ (Len iPhone).
4. Po nájdení aplikácie poklepte na „Get“ (Získať).
5. Potom poklepte „Install“ (Inštalovať).
6. Zadajte platné Apple ID a heslo
7. Po zadaní hesla sa stiahne a nainštaluje aplikácia Interton.
8. Po stiahnutí nájdete aplikáciu na obrazovke mobilného zariadenia – aplikáciu Interton otvoríte klepnutím.



Získajte aplikácie pre zariadenia s Androidom – stiahnite si ich na Google Play podľa týchto krokov:

1. Choďte na Google Play klepnutím na ikonu Play Store  na svojom telefóne s Androidom.
2. V Google Play vyhľadajte „Interton“ a názov aplikácie
3. Po nájdení aplikácie klepnite na „Install“ (Inštalovať), potom „Accept“ (Potvrdiť), aby sa aplikácii umožnil prístup k určitým funkciám vo vašom telefóne, ako je Bluetooth
4. Po zadaní hesla sa stiahne a nainštaluje aplikácia Interton.
5. Po dokončení inštalácie aplikáciu Interton otvoríte klepnutím na „Open“ (otvoriť)

Aplikácia Interton Sound



Aplikácia Interton Sound poskytuje neobvyklú používateľskú ústretovosť len s jedným klepnutím prstom. Ovládajte a prispôbte si nastavenia načúvacích prístrojov priamo z mobilného zariadenia, aby ste si mohli personalizovať svoju schopnosť počutia podľa zvukového prostredia.

Aplikácia Interton Sound je dostupná v App Store a v Google Play.

Na používanie aplikácie potrebujete tieto zariadenia:

Načúvacie prístroje:


- Interton Ready alebo novšie verzie.

Mobilné zariadenia:


- iPhone, iPad alebo iPod touch.
- Podporované zariadenia s Androidom.

Navštívte našu webovú stránku, kde nájdete konkrétne informácie o kompatibilite, a aktuálny zoznam kompatibilných mobilných zariadení:

www.interton.com/compatibility

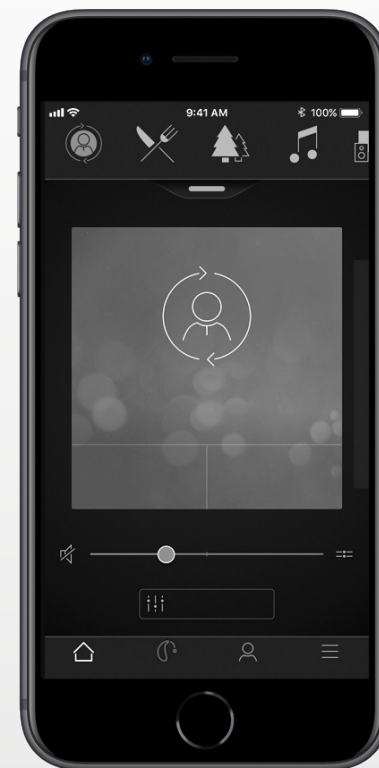


Funkcie aplikácie Interton Sound

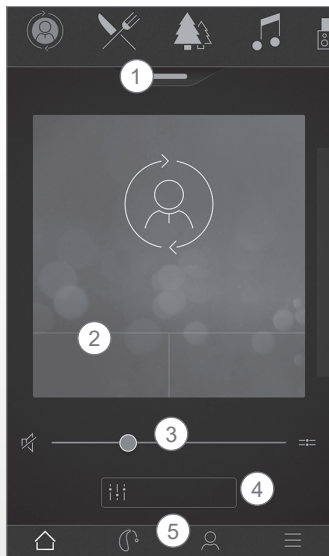


Hlavná obrazovka:

1. Použite karusel, **rozbaľovaciu ponuku** alebo ťahanie na výber načúvacieho prístroja alebo prenosového programu či obľúbenej položky. Klepnite na rozbaľovaciu ponuku na úpravu programov a obľúbených položiek.
2. Použite **rýchle tlačidlá** na pokročilé nastavenia zvuku jedným klepnutím.
3. Nastavujte **hlasitosť** alebo stlmenie.
4. Použite **vylepšovač zvuku Sound Enhancer** na prispôsobenie výšok/stredov/basov. Použite tiež manažéra tinitu na prispôsobenie výšok a kolísania zvuku z Generator.
5. **Navigačná ponuka.**

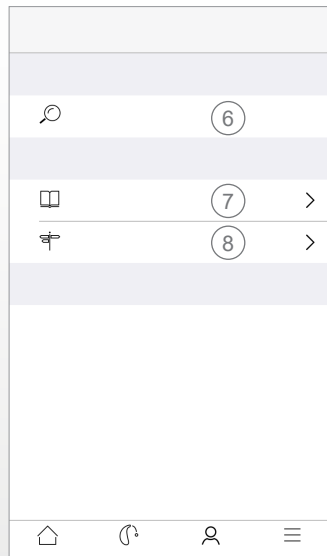

Ponuka „Moje“:

6. Nájdite svoj **stratený načúvací prístroj**.
7. **Dozvedte sa viac o aplikácii** a jej funkciách.
8. **Pomocné tipy** na používanie aplikácie a načúvacích prístrojov.

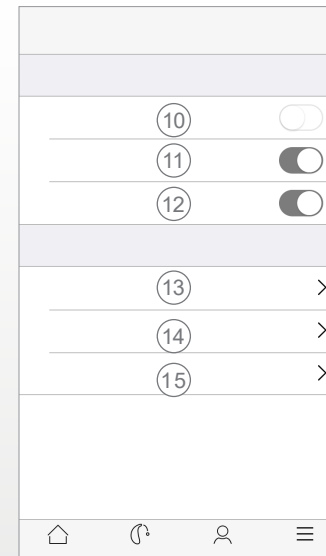

Ďalšia ponuka:

10. Vstúpiť do/opustiť **demonštračný režim**.
11. Zapnúť/vypnúť **pomocné tipy**.
12. Zapnúť/vypnúť **automatickú aktiváciu obľúbených miest**.
13. **Informácie:** Prečítajte si informácie o aplikácii a značke.
14. **Právne informácie:** Prečítajte si o výrobcovi, podmienkach a zásadách ochrany súkromia. Pozrite si, udeľte alebo stiahnite súhlas so spracovaním údajov.
15. **Podpora:** Viac pomoci s aplikáciami a ďalšie odkazy na webovú pomoc a často kladené otázky.

Zamýšľané použitie aplikácií pre mobilné zariadenia:

Aplikácie pre mobilné zariadenia sú určené na použitie s bezdrôtovými načúvacími prístrojmi. Aplikácie pre mobilné zariadenia odosielať a prijímajú signály z bezdrôtových načúvacích prístrojov prostredníctvom mobilných zariadení, pre ktoré boli tieto aplikácie vyvinuté.



Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko

Akékoľvek otázky týkajúce sa smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS by sa mali adresovať spoločnosti Interton A/S

Aplikácia Interton EasyHearing



Aplikácia Interton Easy Hearing vám poskytuje kontrolu nad vašimi načúvacími prístrojmi.

Pri používaní s Phone Clip 2 vám Interton Easy Hearing umožňuje používať vaše mobilné zariadenia na jednoduché získanie prehľadu o vašich bezdrôtových načúvacích prístrojoch Interton a bezdrôtovom príslušenstve Interton a ich diaľkové ovládanie.

Aplikácia Interton Easy Hearing je dostupná v App Store a v Google Play.

Na používanie aplikácie potrebujete tieto zariadenia:

Načúvacie prístroje:

- Bezdrôtové načúvacie prístroje Interton.

Bezdrôtové príslušenstvo:

- Interton Phone Clip 2.

Mobilné zariadenia:

- iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 7 alebo novšou verziou.
- Androidové zariadenia* s Android OS 2.3.5 alebo novšou verziou.


Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu by sa aplikácia Interton Easy Hearing nemala aktívne používať na viac ako jednom mobilnom zariadení naraz.

Ak si želáte viac informácií, pozrite si stránku **www.interton.com**

*Funkčnosť overená pre vybrané modely od výrobcov HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung a Sony.




Funkcie aplikácie Interton EasyHearing

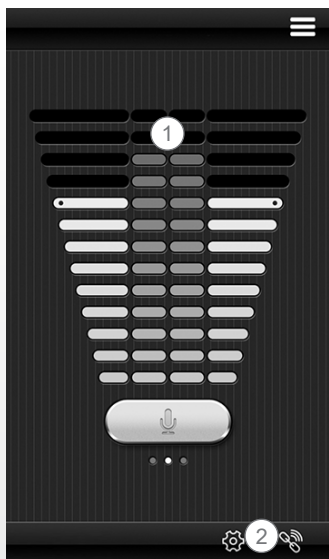

1. **Nastavujte alebo stlmte úroveň hlasitosti** na svojich bezdrôtových načúvacích prístrojoch. Nastavujte alebo stlmte úroveň hlasitosti na svojom bezdrôtovom príslušenstve.

2. Použite **vyhradenú obrazovku so spojeniami** na prehľad o spojeniach medzi aplikáciami a vašimi načúvacími prístrojmi.

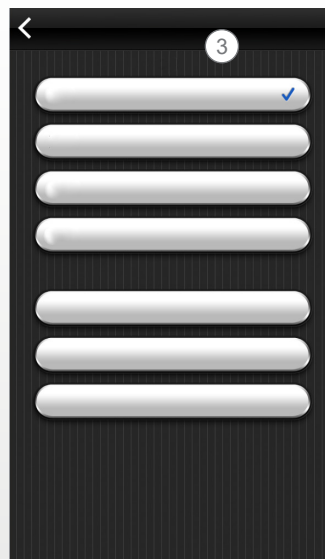

3. **Prepínajte manuálne a prenosové programy.**

Zamýšľané použitie aplikácií pre mobilné zariadenia:

Aplikácie pre mobilné zariadenia sú určené na použitie s bezdrôtovými načúvacími prístrojmi. Aplikácie pre mobilné zariadenia odosielaajú a prijímajú signály z bezdrôtových načúvacích prístrojov prostredníctvom mobilných zariadení, pre ktoré boli tieto aplikácie vyvinuté.



Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko

Akékoľvek otázky týkajúce sa smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS by sa mali adresovať spoločnosti Interton A/S

Varovania a bezpečnostné opatrenia

Používanie s aplikáciami pre mobilné zariadenia:

Notifikácie aktualizácií aplikácie by sa nemali deaktivovať a odporúča sa, aby používateľ inštaloval všetky aktualizácie aplikácie a operačného systému na zabezpečenie čo najlepšej ochrany.

Aplikácia sa smie používať iba so zariadeniami Interton, pre ktoré je určená. Spoločnosť Interton nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak sa aplikácia používa s inými zariadeniami alebo ak sa na ovládanie prístrojov Interton používajú aplikácie tretej strany.

Varovania a upozornenia

Pri používaní aplikácie Interton s načúvacím prístrojom si určite prečítajte používateľskú príručku načúvacieho prístroja. Používateľská príručka načúvacieho prístroja je súčasťou balenia načúvacieho prístroja. Ak potrebujete nový exemplár, obráťte sa na zákaznícku podporu Interton.

Dbajte na informácie označené výstražným symbolom



VÝSTRAHA poukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym poraneniam,
POZOR signalizuje situáciu, ktorá by mohla viesť k malým a stredným zraneniam.





Výrobca podľa
smernice EÚ 93/42/EHS
o zdravotníckych pomôckach:

Celosvetové ústredie
Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

CVR no. 55082715